



RYZRAIRBOOTS

Benutzerhandbuch

EN | DE | FR | ES | IT | PL



NOW YOU
ARE A
RYZR

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Wir sind bestrebt, die RYZR Airboots so sicher wie möglich zu gestalten. Es handelt sich um ein fortschrittliches mechanisches Werkzeug mit elektrischen Komponenten. Bei unsachgemäßer Verwendung oder Wartung der RYZR Airboots und ihres Zubehörs besteht Brand-, Stromschlag- oder Verletzungsgefahr. Bei der Verwendung der RYZR Airboots sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter:

Wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden oder Gegenanzeigen bestehen, die die Verwendung eines Medizinprodukts erfordern, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Wenn Sie Entzündungen, Infektionen, Schmerzen oder Blutungen unbekannter Ursache (innerlich oder äußerlich) an oder in der Nähe der Anwendungsstelle bemerken oder Wunden, Geschwüre oder Druckgeschwüre an oder in der Nähe der Anwendungsstelle haben, dürfen Sie dieses Produkt nicht verwenden.

Personen, bei denen einer der folgenden Zustände vorliegt, dürfen dieses Produkt nicht verwenden:

- Lungeninsuffizienz oder Lungenödem;
- Schwere Herzerkrankungen, Herzinsuffizienz, labile Hypertonie oder implantierte elektronische Geräte (z. B. Herzschrittmacher);
- Diagnose oder Verdacht auf tiefe Venenthrombose (TVT), Venenkrebs, Thrombophlebitis (die einen Gefäßverschluss verursachen kann), akute Venenthrombose oder Thrombose jeglicher Art;
- Schwere Entzündung oder schwere Infektion der Gliedmaßen, die nicht wirksam behandelt werden können;
- Schwere Blutgerinnungsstörung;
- Akute entzündliche Dermatitis oder großflächige ulzerative Ausschläge;
- Schwere Arteriosklerose, arterielle Insuffizienz oder sonstige Gefäßerkrankungen;
- Kinder und schwangere Frauen;
- Ödem bei Patienten mit Niereninsuffizienz;
- Vor Kurzem erhaltene Hauttransplantation;
- Spezielle Deformationen der Gliedmaßen;
- Akutes Lungenödem;
- Akute Thrombophlebitis;
- Akute Infektion;
- Akute Herzinsuffizienz;
- Tiefe Venenthrombose (TVT);
- Beginnende Lungenembolie;
- Neoplastische Erkrankungen;
- Wunden, Verletzungen oder Tumoren an oder in der Nähe der Anwendungsstelle;
- Fraktur oder Luxation an oder in der Nähe der Anwendungsstelle;
- Starke Schmerzen oder Taubheitsgefühl in den Gliedmaßen;
- Implantierte künstliche Materialien im Massagebereich (z. B. künstliche Gelenke, Metall oder Silikon).

Wenden Sie dieses Produkt nicht auf unempfindlichen oder tauben Körperteilen an. Wenden Sie dieses Produkt nicht bei schlechter Durchblutung an. Wenden Sie dieses Produkt nicht an, wenn Sie an Thrombose, tiefer Venenthrombose oder Phlebitis leiden. Dieses Produkt darf nicht an geschwollenen oder entzündeten Stellen und bei Hautausschlägen angewendet werden. Wenden Sie dieses Produkt nicht an, wenn Sie Schmerzen unbekannter Ursache in Ihrer Wade haben.

Wenden Sie dieses Produkt nicht bei Personen an, die bewusstlos, handlungsunfähig oder nicht in der Lage sind, Rückmeldung zum Druck zu geben.

Personen mit schlechter Elastizität der Blutgefäße können bei einer niedrigen Massagedruckstufe beginnen und den Druck nach mehreren Massagen allmählich auf das gewünschte Niveau steigern. Wählen Sie nicht von Anfang an eine hohe Druckstufe, sondern beginnen Sie bei einer niedrigen Druckstufe und erhöhen Sie das Niveau schrittweise. Legen Sie die Manschetten an und positionieren Sie sich so entspannt und ausgestreckt wie möglich.

Sie sollten keinen Alkohol trinken, bevor Sie das Gerät für die Massage verwenden. Wenn während der Massage Symptome und Beschwerden wie lokale subkutane Blutungsstellen, Purpura, Ekchymose oder Hämatome oder Beschwerden wie Schmerzen, Lähmung, Engegefühl in der Brust, Atembeschwerden oder Schwindel auftreten, brechen Sie die Verwendung des Massagegeräts sofort ab und wenden Sie sich an Ihren Arzt oder das Sie betreuende medizinische Fachpersonal. Der Arzt wird entscheiden, ob Sie dieses Gerät weiterhin verwenden dürfen, indem er die Ursache dieser Symptome und Beschwerden je nach der klinischen Situation diagnostiziert.

Dieses Produkt ist nur für gesunde Erwachsene bestimmt. Es verwendet unterschiedliche Druckniveaus, um Ihre Gliedmaßen für die Erholung nach körperlicher Betätigung zu massieren.

Wenn Sie schwanger sind, fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.

Wenden Sie dieses Produkt nur an den Beinen an.

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Nehmen Sie keine Änderungen an Teilen des Produkts vor.
- Drücken Sie im Notfall oder bei körperlichen Beschwerden die Stopp-Taste oder betätigen Sie den Schieberegler für die Notdruckentlastung und nehmen Sie die Manschetten nach der schnellen Entleerung von Ihren Gliedmaßen ab.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit brennbaren Gasen, hohen Temperaturen oder starker elektromagnetischer Strahlung. Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit, Staub, ätzenden Flüssigkeiten und Dampf.
- Es darf keine Flüssigkeit in irgendeinen Teil des Produkts gelangen. Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser oder Flüssigkeit.
- Lassen Sie keine Flüssigkeit in den Lufteinlass gelangen.
- Stellen Sie das System, die Stromversorgung oder andere Komponenten nicht an einem Ort auf, an dem sie beschädigt werden, herunterfallen oder andere stören könnten.
- Legen Sie keine spitzen Gegenstände (z. B. Nadeln oder andere spitze Metallgegenstände) in der Nähe des Produkts ab.
- Die Komponenten nicht durchstechen oder beschädigen, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Um das Risiko einer Strangulation oder Erstickung zu vermeiden, dürfen Säuglinge und Kinder Komponenten wie Stromkabel oder Schläuche nicht unbeaufsichtigt verwenden. Bewahren Sie dieses Produkt für Kinder und Haustiere unzugänglich auf.
- Lassen Sie während des Gebrauchs die Geräte, die Stromversorgung oder andere Komponenten, die durch Kinder, Haustiere, Schädlinge oder Flüssigkeiten beschädigt werden können, nicht unbeaufsichtigt.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Flusen oder Staubpartikel an der Steuerung oder an den Schlauchverbindungen ansammeln. Falls sich Flusen oder Staub ansammeln, wischen Sie das System vor der Verwendung mit einem trockenen Tuch ab.
- Die Lebenserwartung dieses Produkts und des integrierten Akkus beträgt fünf Jahre. Nach 500 Lade- und Entladezyklen beträgt die Akkukapazität $\geq 80\%$.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, während Sie schlafen. Stehen Sie nicht auf und gehen Sie nicht umher, solange Sie dieses Produkt angelegt haben.
- Überprüfen Sie das Gerät vor der Massage auf ordnungsgemäße Funktion. Stellen Sie sicher, dass das Gerät in gutem Zustand ist (keine Leckage, Beschädigungen oder andere Probleme).
- Verwenden Sie die Manschette nicht mit Schmuck oder anderen harten Gegenständen. Dies könnte zu Verletzungen oder Beschädigung der Manschette führen.
- Verwenden Sie keine anderen Hilfsmittel zum Aufblasen der Manschette. Dies könnte die Manschette beschädigen oder Verletzungen verursachen.
- Das Produkt nicht aufblasen, wenn es nicht richtig getragen wird der Reißverschluss offen ist, da dies das Produkt beschädigen kann.
- Dieses Produkt darf nicht in Kombination mit anderen elektronischen Geräten oder Medizinprodukten installiert oder verwendet werden.
- Wenn das Produkt eine Fehlfunktion aufweist, beenden Sie sofort die Verwendung und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen Drahtlosgeräte verboten sind, um Gefahren und Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Personen mit Haut- oder Infektionskrankheiten sollten die Geräte und Zubehörkomponenten mit anderen Personen teilen.
- Wenn Sie die Manschette sofort entleeren müssen, betätigen Sie den Schieberegler für die Notdruckentlastung an der Steuerung, um den Druck umgehend aus der Manschette entweichen zu lassen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe eines Mikrowellenherds oder anderer Hochfrequenzgeräte.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, während Sie ein Kraftfahrzeug führen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen, die den angegebenen Bereich von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck überschreiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen außerhalb des angegebenen Temperaturbereichs (5–40 °C).
- Verwenden Sie das Produkt nicht in Umgebungen, die den angegebenen Luftfeuchtigkeitsbereich ($\leq 90\%$ relative Luftfeuchtigkeit) überschreiten.
- Das Produkt darf nur in Umgebungen mit einer durchschnittlichen Höhenlage von bis zu 3000 Metern verwendet werden.
- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, verwenden Sie nur die in diesem Benutzerhandbuch aufgeführten Komponenten, annehmbaren Teile und Materialien.

- Das Produkt nicht von Hand oder in der Maschine waschen.
- Wischen Sie nur die Oberfläche ab.
- Das Produkt nicht trockenreinigen.
- Das Produkt nicht auswringen, bügeln, im Wäschetrockner oder durch Hitzeeinwirkung trocknen.
- Das Produkt nicht bleichen.

AKKU WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

- Nehmen Sie vor der erstmaligen Verwendung die Akkubox heraus und laden Sie den Akku für etwa drei Stunden vollständig auf.
- Verbinden Sie das Ausgangsende des Typ-C-Kabels mit dem DC-Ladeanschluss der Akkubox des Massagegeräts und schließen Sie dann das Eingangsende des Typ-C-Kabels an eine Powerbank oder ein Smartphone-Ladegerät an (5 V 2 A; die Ladezeit ist länger, wenn der Nennstrom des Ladegeräts weniger als 2 A beträgt).
- Wenn die Akkuanzeige auf dem Akku blinkt, bedeutet dies, dass der Akku geladen wird.
- Wenn alle Akkuanzeigen auf dem Akku nicht mehr blinken und konstant leuchten, bedeutet dies, dass das Gerät vollständig geladen ist.
- Sie können den Akku jederzeit bei jedem Akkustand laden.
- Wenn die erste Anzeigeleuchte leuchtet, bedeutet dies, dass der Akkustand auf 25 % sinkt.
- Wenn die erste Anzeigeleuchte blinkt, bedeutet dies, dass der Akkustand auf unter 10 % gefallen ist und der Akku geladen werden muss.
- Es wird empfohlen, das Produkt alle drei Monate zu laden, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird.
- Die durchschnittliche Laufzeit des Geräts nach dem Laden beträgt abhängig von der Stufe und dem Modus während der Verwendung etwa 2,5 Stunden.

Bitte unterstützen Sie das Recycling von wiederaufladbaren Batterien (Lithium-Ionen-Akkus).

 Gefahr	<p>Der Akku darf ausschließlich für dieses und kein anderes Produkt verwendet werden. Den Akku nicht laden, wenn er entfernt wurde. Den Akku von Feuer fernhalten, um Überhitzen zu vermeiden. Den Akku nicht mit Nägeln durchbohren, mit Gewalt aufschlagen, zerlegen oder verändern. Den Plus- und Minuspol des Akkus nicht direkt durch einen metallischen Gegenstand verbinden. Nicht zusammen mit Halsketten, Haarnadeln usw. aufbewahren. Laden, verwenden oder platzieren Sie den Akku nicht in Umgebungen mit hoher Temperatur, wie z. B. in der Nähe des Herdes oder unter starker Sonneneinstrahlung. Anderenfalls kann sich der Akku erhitzen, Feuer fangen oder zerbrechen.</p>
 Gefahr	<p>Dieses Produkt enthält einen Lithium-Akku. Entfernen Sie diesen nicht. Bewahren Sie dieses Produkt für kleine Kinder unzugänglich auf. Falls Batterieflüssigkeit ausläuft, vermeiden Sie es, die Flüssigkeit mit bloßen Händen zu berühren, und verhalten Sie sich wie folgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Direkter Kontakt der Batterieflüssigkeit mit den Augen kann zu Erblindung führen. Reiben Sie Ihre Augen nicht mit den Händen, spülen Sie sie mit Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf. b) Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Körperteilen oder Kleidung kann Hautreizungen oder -verletzungen verursachen. Spülen Sie mit Wasser und suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn die Beschwerden andauern. Der Akku darf nur bei der Entsorgung des Produkts zerlegt werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Brand, Stromschlag, Verletzungen oder anderen Unfällen führen. Bitte wenden Sie sich für Reparaturanfragen (außer Akkutausch) an den Originalhändler.

Der Lithium-Ionen-Akku dieses Produkts ist eine wertvolle Ressource, die recycelt und wiederaufbereitet werden kann. Nehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts den Akku heraus und übergeben Sie ihn einen Fachbetrieb für das Recycling und die Wiederaufbereitung von wiederaufladbaren Batterien.

VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG DES AKKUS

Verwenden Sie nur den im Lieferumfang dieses Produkts enthaltenen Akku. Die Verwendung eines anderen Akkus kann Fehlfunktionen verursachen.

Verwenden Sie den Akku nicht, wenn Sie eine Geruchs- oder Hitzeentwicklung, Verformung, Verfärbung oder eine andere ungewöhnliche Situation bemerken. Wenn der Akku verwendet oder geladen wird, beenden Sie die Anwendung oder trennen Sie das Ladegerät umgehend.

Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.

FCC-KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt folgenden beiden Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen können, auch Störungen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen.

HINWEISE ZUR FCC-KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG

Dieses Gerät wurde gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor funktechnischen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Anlage keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer aufgefordert, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Verbinden Sie das Gerät mit einer Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu den bereitgestellten Befestigungselementen zu erhalten.

RoHS-KONFORMITÄTSEKRLÄRUNG

Unsere Produkte entsprechen der Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (2011/65/EU) (RoHS 2.0). Die Rohstoffe und Komponenten unserer Produkte entsprechen den Beschränkungen für die folgenden toxischen und gefährlichen Stoffe.

Cadmium (Cd): <100 ppm	Blei (Pb): <1000 ppm
Quecksilber (Hg): <1000 ppm	Sechswertiges Chrom (Cr VI): <1000 ppm
Polybromierte Biphenyle (PBB): <1000 ppm	Polybromierte Diphenylether (PBDE): <1000 ppm
Bis (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP): <1000 ppm	Benzylbutylphthalat (BBP): <1000 ppm
Dibutylphthalat (DBP): <1000 ppm	Diisobutylphthalat (DIBP): <1000 ppm

WEE-RICHTLINIE

Ordnungsgemäße Handhabung dieses Produkts

Dieses Symbol weist darauf hin, dass das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung möglicher Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung muss es verantwortungsvoll recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um ein gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte das Rückgabe- und Sammelsystem oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt dem umweltverträglichen Recycling zuführen.



PRODUKT

Deflate-funktion

5 versch. Massageprogramme

Individuell steuerbare Kammern

5 überlappende Kammern mit Luftkompression



Smart control

Zeitsteuerung bis 60 Minuten

Wireless

Austauschbare Batterien

Akkulaufzeit: 2,5 Stunden (abhängig von der gewählten Stufe und Modus)
Batteriekapazität: 2600 mAh

PRODUKTMERKMALE

Produktname	RYZR Airboots (Kompressionsmassagegerät)
Modell	Größe M: A200277.6 Größe L: A200277.7 Größe XL: A200277.8
Druckbereich des Geräts	Einstellbar zwischen 40-180 mmHg
Nennleistung	25 W
Nennspannung	7,3 V 18,98 Wh
Eingangsspannung	5 V 2 A
Batteriekapazität	2600 mAh
Betriebsarten	M1 Fatigue Relief M2 Training Activation M3 Workout Recovery M4 Overall Relaxation M5 Deep Care
Zeiteinstellungen	15-60 min. in 5-Minuten-Schritten
Druckstufe	15 Druckstufen, 10 mmHG/Stufe
Batterie/Akku	Nicht fest installiert

GRÖSSENTABELLE AIRBOOTS

	L x B x H (cm)	Außennaht (cm), Knöchel bis Hüfte
M	94.0 x 38.0 x 14.0	70-80
L	102.0 x 38.0 x 15.0	75-83
XL	112.0 x 40.0 x 15.0	80-95

LIEFERUMFANG



Steuereinheit mit Display



Emergency button



Hochwertiger Reißverschluss




Austauschbarer Patch


1 Paar RYZR Airboots inklusive Aufbewahrungstasche
2 Ladekabel
2 Batterien inklusive Aufbewahrungstasche

Beileger:
1 Schnellstartanleitung
1 Massageaufsätze
1 Kundenservice

HAUPTSTRUKTUR DES GERÄTS

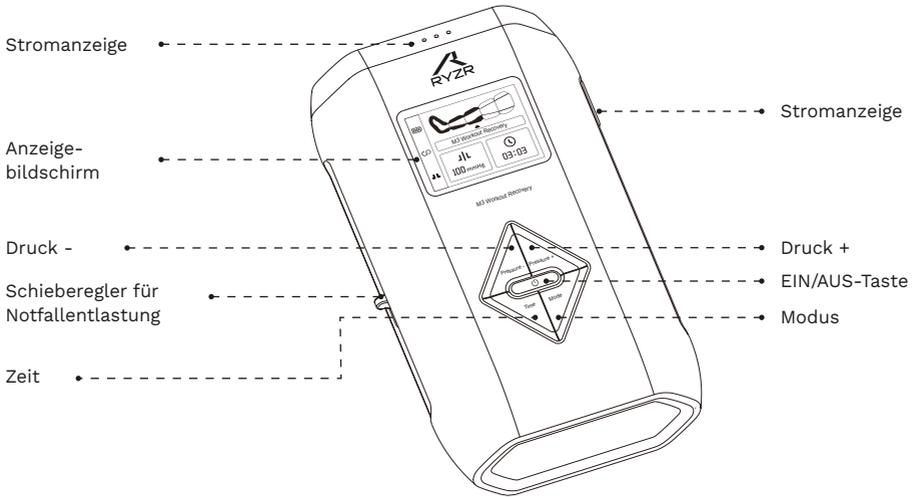


KOMPONENTEN UND FUNKTIONEN

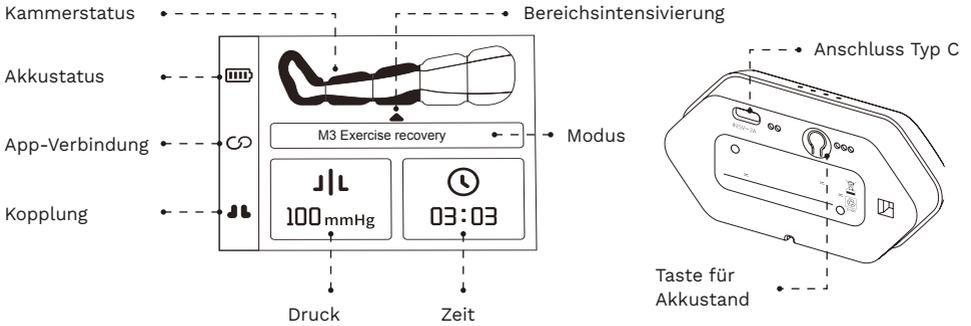


FUNKTIONSWEISE DES GERÄTS


Nachdem der Mikrocomputer des Druckluft-Massagegeräts die vom Benutzer eingegebenen Informationen erhalten hat, führt die integrierte Software eine entsprechende Analyse auf der Grundlage der ausgewählten Parametern durch. Er aktiviert daraufhin verschiedene Lasten, indem er den Systemkreis ansteuert und den Luftpumpenstrom gemäß den vom Benutzer festgelegten Parametern steuert. Danach werden die vom Drucksensor erfassten Drucksignale verstärkt, damit der Mikrocomputer nach der A/D-Wandlung den Luftsackdruck steuern kann.

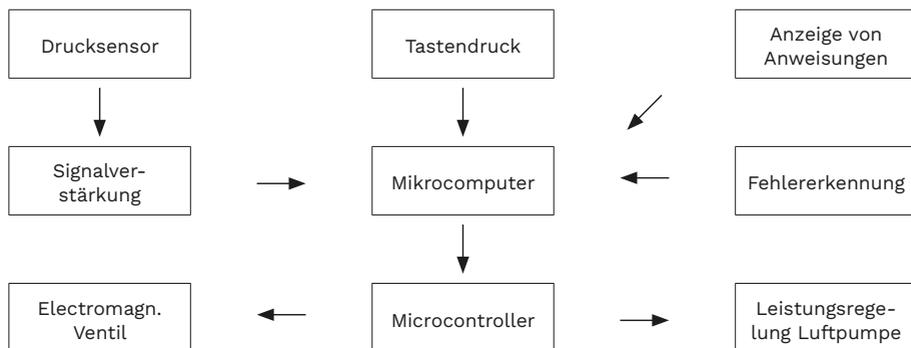

BEDIENUNGSANLEITUNG

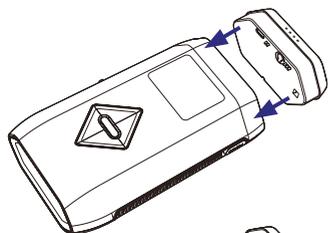

Einlegen des Akkus: Richten Sie den unteren Schieber der Akkubox am unteren Schlitz der Steuerung aus. Schieben Sie die Akkubox vorsichtig hinein, bis sie mit der Steuerung bündig abschließt. Wenn Sie ein Klicken hören, ist der Akku richtig eingelegt. Stellen Sie sicher, dass er richtig eingelegt ist, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

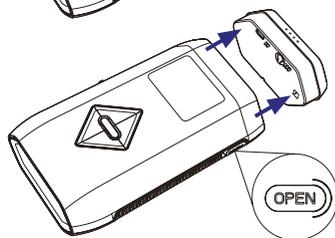


Entfernen des Akkus: Nachdem das Gerät den Betrieb beendet hat, drücken Sie einfach die Akkuentriegelungstaste mit der Aufschrift „OPEN“ an der Seite des Steuergeräts, und der Akku springt etwas heraus. Sie können den Akku dann einfach mit den Händen zum Aufladen entfernen.

Vorbereitung


Nehmen Sie die Geräte heraus und legen Sie sie vor der Verwendung symmetrisch an den jeweiligen Beinen an. Nehmen Sie die Akkus heraus und legen Sie sie in die Steuerungen ein. Schalten Sie danach die Steuerungen ein und stellen Sie die entsprechende Massagestufe und den entsprechenden Massagemodus ein. Wir empfehlen Ihnen, eine bequeme und entspannte Position im Liegen oder im Sitzen einzunehmen. Leichtes Anheben der Gliedmaßen während der Massage kann den Lymphfluss und die Durchblutung der Gliedmaßen unterstützen. Die Geräte können paarweise oder einzeln verwendet werden. Wenn die beiden Steuerungen beim Einschalten nicht automatisch gekoppelt werden, führen Sie die Kopplung erneut durch. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet das Symbol  auf dem Anzeigebildschirm auf.

SCHRITTE

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät kurz die Taste , um den Strom einzuschalten. Der Anzegebildschirm leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät gestartet wurde.
2. Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie kurz die Modus-Taste, um den Modus auszuwählen. Jeder Tastendruck wechselt einmal den Modus und es fünf Modi mit jeweils einem voreingestellten Druckniveau und einer voreingestellten Dauer durchlaufen.
3. Stellen Sie das Druckniveau mit Druck + und Druck - ein. Die Erhöhung des Niveaus intensiviert die Massage. Das Druckniveau kann bei laufendem Gerät eingestellt werden. Das Gerät stoppt für 10 Sekunden, bevor es mit dem neuen Zyklus und Druck wieder fortgesetzt wird.
4. Vor dem Start des Geräts können Sie die Massagedauer durch kurzes Drücken der Zeit-Taste anpassen, um die Zeit in Fünf-Minuten-Schritten auf eine beliebige Dauer zwischen 15 und 60 Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie kurz die Taste , nachdem Sie die Parameter zum Starten des Geräts eingestellt haben. Wenn Sie das laufende Gerät vor der eingestellten Zeit stoppen müssen, drücken Sie die Taste  erneut.
6. Das Gerät arbeitet nach der eingestellten Zeit und stoppt automatisch, wenn die Zeit abgelaufen ist. Im Standby-Modus wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, wenn es 60 Sekunden lang inaktiv ist.
7. Wenn Sie während der Anwendung Beschwerden oder übermäßigen Druck verspüren, schieben Sie den Schieberegler für die Notdruckentlastung in die EIN-Stellung, um die Notentleerung auszulösen.

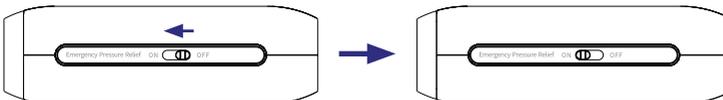

Schieben Sie den Schieberegler nach der Entleerung zurück in die AUS-Stellung, um den Normalbetrieb wiederaufzunehmen.

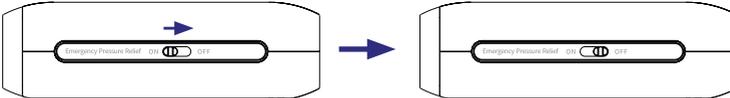

8. Halten Sie  im Standby-Modus oder bei laufendem Gerät zwei Sekunden lang gedrückt. Das Gerät beginnt dann, die Luft für etwa zwei Minuten abzulassen und schaltet sich nach Abschluss automatisch aus. Um diesen Schritt zu überspringen, halten Sie  für sofortiges Ausschalten zwei Sekunden lang gedrückt oder drücken Sie die Taste kurz, um zum Standby-Modus zurückzukehren.



EINSTELLEN DER ANZAHL DER MASSAGEKAMMERN

Sie können 1–5 Massagekammerbereiche aktivieren. Die Bereiche können vom proximalen zum distalen Ende jeweils einzeln deaktiviert werden. Die Bereichseinstellung bleibt nach dem Ausschalten der Steuerung unverändert. Wenn sich das Gerät nach dem Einschalten im Standby-Modus befindet, halten Sie die Taste Druck + eine Sekunde lang gedrückt, um die grafische Oberfläche zur Kammerauswahl zu öffnen (Abbildung 1). Stellen Sie mit den Tasten Druck + und Druck - die Anzahl der aktivierten Bereiche ein. Drücken Sie kurz, um die Einstellung zu speichern und zu beenden. Auf dem Gerät muss mindestens ein Bereich aktiviert sein. Die aktivierten Bereiche werden in durchgehendem Grau angezeigt, während die deaktivierten Bereiche in Dunkelgrau angezeigt werden. Diese Funktion kann nur eingestellt werden, bevor das Gerät mit der Massage beginnt.

BEREICHsverbesserung (NUR FÜR DEN TRAININGS-ERHOLUNGSMODUS)

Bevor das Gerät mit der Massage beginnt (Standby-Modus), können Sie mit der Bereichsintensivierungsfunktion die Massagefrequenz eines einzelnen Bereichs in einem Zyklus erhöhen. Die Bereichsintensivierung ist für die stärkere Massage in einem bestimmten Bereich konzipiert. Es werden zwei zusätzliche Massagen im Bereich hinzugefügt. Um diese Funktion zu aktivieren, halten Sie im Standby-Modus die Taste Druck - eine Sekunde lang gedrückt, und das Gerät wechselt automatisch in zur grafischen Oberfläche für die Bereichsintensivierung. Wählen Sie mit den Tasten Druck + und Druck - den Bereich aus, den Sie intensivieren möchten. Die Bereichsintensivierung ist in Abbildung 2 unten dargestellt. Drücken Sie kurz, um die Einstellung zu speichern und zu beenden. Die Bereichsintensivierungsfunktion kann nur auf einen Bereich angewendet werden und ist nur im Modus M3 Erholung nach körperlicher Betätigung verfügbar.

! Bleiben Sie während der Anwendung entspannt. Wenn während der Behandlung Beschwerden auftreten, beenden Sie sofort die Anwendung des Geräts.

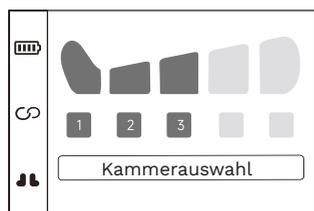


Abbildung 1



Abbildung 2


AUFBEWAHRUNG

Falten Sie das Produkt nach der Anwendung und bewahren Sie es wie folgt auf. Legen Sie das Gerät in die mitgelieferte Aufbewahrungstasche, um es in eine Reisetasche oder einen Koffer zu packen.

<p>Schritt 1: Nach der Dekompression falten und flach ablegen.</p>	<p>Schritt 2: Die beiden Enden zusammenfalten.</p>	<p>Schritt 3: Nochmals zur Hälfte falten.</p>
<p>Schritt 4: Die Enden komplett zusammenfalten.</p>	<p>Schritt 5: Die Aufbewahrungstasche öffnen und die Beinmanschetten hineinlegen.</p>	<p>Schritt 6: Zum Schluss die Aufbewahrungstasche zubinden und ablegen.</p>

MODUSBESCHREIBUNG

Fatigue Relief und Training Activation Modus:

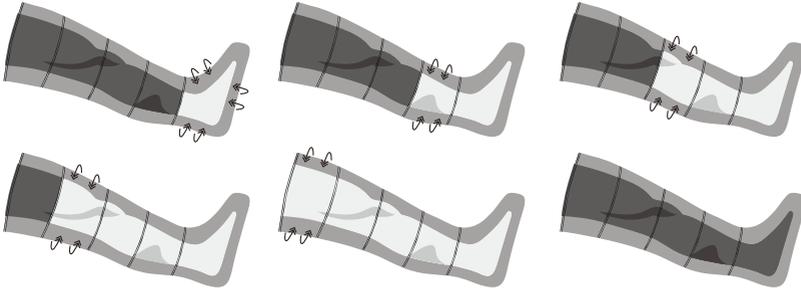


Fatigue Relief: (Ermüdungs- linderung)

Vom distalen zum proximalen Ende erhöht das Massagegerät schrittweise die Anzahl der aktivierten Kammern in einem Zyklus von Kammer 1 zu Kammer 5. Durch die Förderung der Durchblutung in den unteren Gliedmaßen und die Linderung der Muskelermüdung sind diese Modi perfekt geeignet, um durch tägliche Aktivitäten oder körperliche Betätigung verursachte Ermüdung, Spannung oder Schmerzen zu beseitigen.

Training Activation: (Aktivierung für das Training)

Es wird empfohlen, sich vor körperlicher Betätigung aufzuwärmen und den Modus zur Aktivierung für das Training zu verwenden. Der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Modi ist der voreingestellte Druck und die Dauer. Die Standarddruckdauer beträgt drei Sekunden für den Modus Ermüdungslinderung und acht Sekunden für den Modus Aktivierung für das Training. Die Dauer kann über die mobile App angepasst werden.


Exercise Recovery Modus:

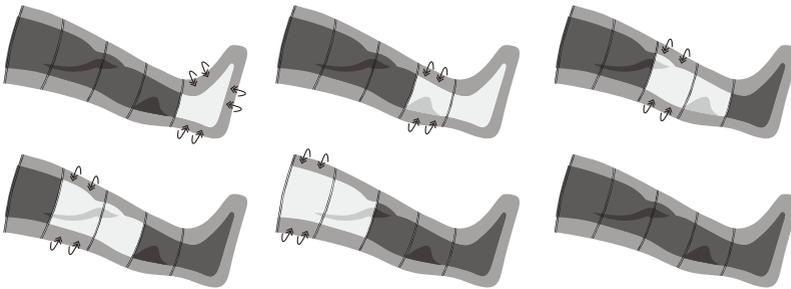

Exercise Recovery: (Erholung nach körperlicher Betätigung)

In einem Zyklus vom distalen zum proximalen Ende beginnt das Massagegerät mit dem Aufblasen/Entleeren von Kammer 1 (Kontraktion/Entspannung ähnlich wie bei Muskeln), wechselt zwei Kammern nach hinten und übt zyklisch Druck aus, um die Durchblutung zu fördern und den Stoffwechsel zu optimieren. Dies ist ideal für die nachhaltige Linderung von Muskelschmerzen nach körperlicher Betätigung.

Overall Relaxation Modus:

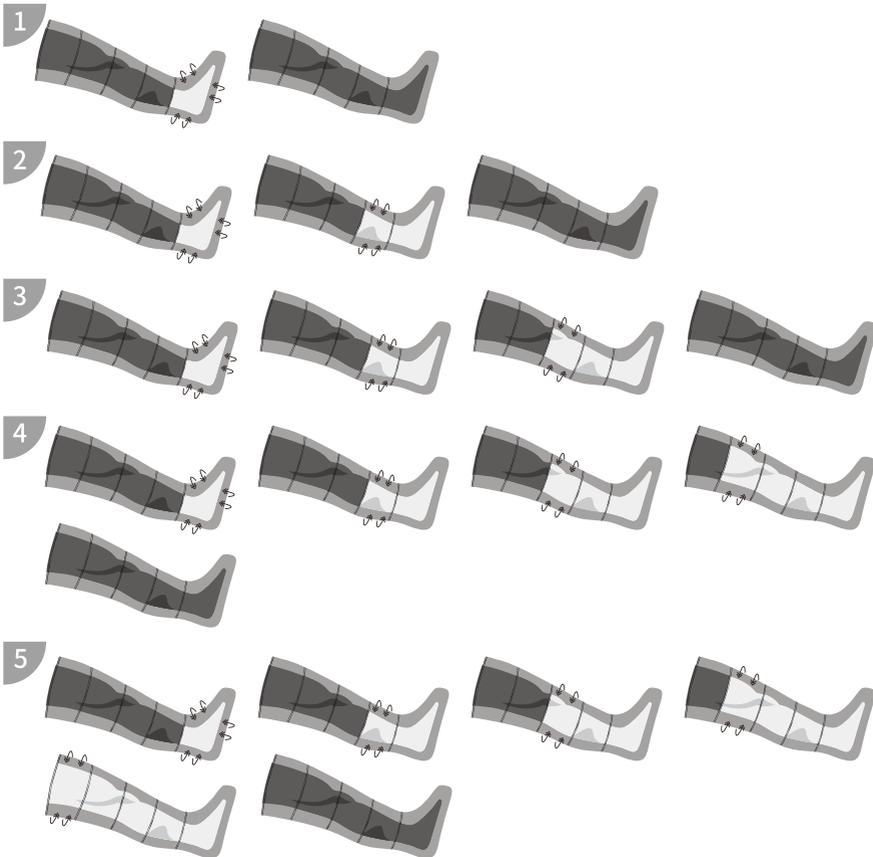

Overall Relaxation: Dieser Modus durchläuft fünf Schritte in einem Zyklus.

(Allgemeine Entspannung) Schritt 1: Kammer 1 wird auf Nenndruck aufgeblasen und entleert, danach erneut auf Nenndruck aufgeblasen und entleert..


Schritt 2: Kammer 1 wird auf Nenndruck aufgeblasen und hält den Druck aufrecht, danach wird Kammer 2 auf Nenndruck aufgeblasen und die Kammern 1 und 2 werden gleichzeitig entleert, um diesen Schritt zu wiederholen.

Schritt 3: Kammer 1 bis Kammer 3 werden auf Nenndruck aufgeblasen, danach werden die Kammern 1-3 gleichzeitig entleert. Dieser Schritt wird zweimal ausgeführt.

Schritt 4: Kammer 1 bis Kammer 4 werden aufgeblasen und der Druck wird aufrechterhalten, danach werden die Kammern 1-4 gleichzeitig entleert und dieser Schritt wird wiederholt.

Schritt 5: Befolgen Sie die ersten vier Schritte, um Kammer 5 aufzublasen und danach alle fünf Kammern gleichzeitig zu entleeren, und wiederholen Sie diesen Schritt erneut. Ein Zyklus ist dann abgeschlossen und der nächsten Zyklus beginnt. Dieser Modus ist ideal für Menschen, bei denen nach längerem Stehen oder Gehen Muskelschmerzen auftreten

Deep Care Modus:

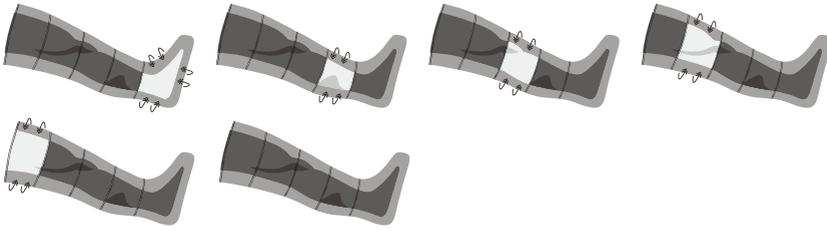

Deep Care:
(Tiefenpflege)

Vom distalen zum proximalen Ende wendet das Massagegerät nacheinander Druck auf Kammer 1 bis Kammer 5 an. Nachdem alle Kammern entleert sind, beginnt das Massagegerät mit dem nächsten Zyklus. Dieser Modus ist ideal Personen mit sitzender Tätigkeit, die zu Steifigkeit im Weichteilgewebe neigen..

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Ursache	Lösung
Einschalten nicht möglich	Der Akku ist leer	Den Akku vollständig aufladen
Laden nicht möglich	Das Ladekabel ist nicht richtig angeschlossen	Prüfen, ob die Steuerung und das Ladekabel richtig angeschlossen sind
	Das Ladekabel ist beschädigt	Prüfen, ob das Ladekabel beschädigt ist
	Das Ladekabel ist nicht kompatibel	Ladegerät oder Powerbank mit USB-A-Schnittstelle verwenden
Automatisches Ausschalten während der Verwendung	Der Akku ist leer	Den Akku vollständig aufladen
 Fehlerhafte Luftkreislaufverbindung	Die Luftkreislauf-Verbindung hat sich gelöst	Luftkreisverbindung prüfen

Bei sonstigen Problemen wenden Sie sich bitte an: service@ryzr.de


Bitte unterstützen Sie das Recycling von wiederaufladbaren Batterien (Lithium-Ionen-Akkus).

1. Der in diesem Produkt eingebaute Lithium-Akku enthält Substanzen, die die Umwelt verschmutzen können. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie dieses Produkt entsorgen.
2. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet oder die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie dieses Produkt zerlegen und den Lithium-Akku entfernen.
3. Die ausführlichen Schritte zum Entfernen des Akkus sind unten dargestellt. Befolgen Sie die Schritte, um dieses Produkt zu zerlegen und den Lithium-Akku zu entfernen.
4. Der entfernte Lithium-Akku muss an Ort bzw. einer Recyclingstelle entsorgt werden, die von den Behörden mit der sicheren Entsorgung beauftragt wurden.


Schritt 1:
Entfernen Sie die Akkuabdeckung.




Schritt 2:
Lösen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.

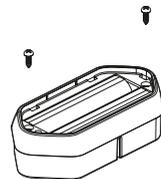

Schritt 3:
Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

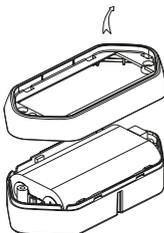

Schritt 4:
Nehmen Sie den Akku heraus und entfernen Sie den Verbindungsstecker zwischen dem Akku und der Platine; klassifizieren und entsorgen Sie anschließend den Akku.

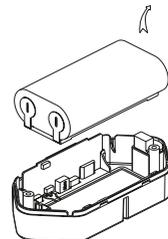

FEHLERMELDUNGEN

Problem	Lösung
 Drucksensor ausgefallen	Wenden Sie sich bitte an: service@ryzr.de
 Luftpumpe fehlerhaft	Wenden Sie sich bitte an: service@ryzr.de

GARANTIE

1. Das Produkt von RYZR enthält eine kostenlosen Garantie von einem Jahr bei Vorlage des Kaufbelegs.
2. RYZR übernimmt keine kostenlosen Garantieleistungen für die folgenden vom Benutzer verursachten Störungen, wie z. B.:
 - a) Durch unbefugtes Zerlegen oder Verändern des Produkts verursachte Störungen.
 - b) Störungen oder Schäden, die durch versehentliches Fallenlassen während der Verwendung und Handhabung verursacht werden.
 - c) Störungen aufgrund unzureichender Instandhaltung.
 - d) Durch nicht ordnungsgemäße Befolgung der Anweisungen im Handbuch verursachte Störungen.
 - e) Durch unsachgemäße Reparatur durch nicht von RYZR autorisierte Einrichtungen verursachte Störungen.
3. Reparaturleistungen, die nicht unter die Garantie fallen, werden gemäß der entsprechenden Regelung berechnet.
4. Wenden Sie sich für Garantieforderungen umgehend per E-Mail an den Kundendienst.

KUNDENDIENST

Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen oder Anliegen haben. Unser Kundendienst-Team antwortet schnell und bietet Lösungen für alle möglicherweise auftretenden Probleme.

E-Mail: service@ryzr.de

Wenn das Produkt defekt ist oder eingeschickt werden muss, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb der angegebenen Garantiezeit mit Ihrer Bestellnummer. Entsorgen Sie keine Produktteile, die für die Inspektion oder Reparatur benötigt werden.