



RYZRPROGUN

Benutzerhandbuch

EN | **DE** | FR | ES | IT | PL



NOW YOU
ARE A
RYZR

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Um das Risiko von Stromschlägen, Bränden, Personenschäden oder Sachschäden zu verringern, muss dieses Produkt mit den folgenden Warnhinweisen, Vorsichten und Sicherheitshinweisen verwendet werden:

Die RYZR Progun ist nur für Erwachsene bestimmt und sollte immer gemäß den folgenden Warnhinweisen und Anweisungen verwendet werden.

Bei Verwendung der RYZR Progun darf nur auf trockenen, sauberen Körperoberflächen angewendet werden, indem die RYZR Progun ungefähr sechzig Sekunden lang leicht auf den Körper gedrückt und bewegt wird.

Die RYZR Progun sollte nur in Weichteilbereichen des Körpers und nicht auf harten oder knöchernen Bereichen des Körpers, einschließlich des Kopfes, angewendet werden.

Bitte beenden Sie die Verwendung der RYZR Progun sofort, wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden haben, abgesehen von leichten Muskelkater.

Bei Verwendung der RYZR Progun können unabhängig von der Druckeinstellung Blutergüsse auftreten. Wenn Blutergüsse auftreten, sollten Sie die RYZR Progun erst dann auf der Blutergussstelle anwenden, wenn der Bluterguss vollständig verheilt ist.

Die Verwendung der RYZR Progun sollte auch bei allen Blutergüssen, Prellungen, Hautausschlägen oder gereizten oder verletzten Hautpartien vermieden werden, bis diese vollständig verheilt sind.

Achten Sie bei der Verwendung der RYZR Progun auf ihre Finger, Zehen und Haare, um Verletzungen zu vermeiden.

Die RYZR Progun sollte trocken gehalten, niemals in Wasser getaucht und stets von Flüssigkeiten und Wärmequellen ferngehalten werden.

Die Belüftungsöffnungen der RYZR Progun sollten frei von Staub, Schmutz und/oder anderen Substanzen gehalten werden, die in die Öffnungen eindringen könnten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Flüssigkeiten, Schmutz, Sand oder Lebensmittel.

Betreiben Sie die RYZR Progun nie länger als eine Stunde am Stück.

Lassen Sie die RYZR Progun nach jedem Gebrauch mindestens 30 Minuten ruhen, bevor Sie sie wieder verwenden.

Die RYZR Progun darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen werden.

Laden Sie die RYZR Progun nicht über Nacht und lassen Sie sie während des Ladevorgangs oder im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.

Nach dem Laden der RYZR Progun sollte das Ladegerät vor Gebrauch vom Ladeanschluss der RYZR Progun getrennt werden.

Vor der Entsorgung einer RYZR Progun muss der Akku entfernt werden. Der Akku muss gemäß den geltenden Vorschriften bei einer geeigneten Entsorgungs- oder Recyclinganlage für Elektroschrott abgegeben werden.

Die RYZR Progun darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet, nicht fallen gelassen und niemals manipuliert oder verändert werden.

Bitte verwenden Sie die RYZR Progun oder andere Perkussions- oder Vibrationsgeräte nicht, ohne zuvor die Zustimmung Ihres Arztes einzuholen.

In den folgenden Fällen gilt die Zustimmung Ihres Arztes:

Schwangerschaft, Diabetes mit Komplikationen wie Neuropathie oder Netzhautschäden, Tragen eines Herzschrittmachers, kürzlich durchgeführte Operationen oder Verletzungen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfall, Spondylolisthesis, Spondylolyse oder Spondylose, kürzlich durchgeführter Gelenkersatz oder Spiralen, Metallstifte oder -platten oder Bedenken hinsichtlich Ihrer körperlichen Gesundheit.

Gebrechliche Personen und Kinder sollten bei der Verwendung von Perkussions- oder Vibrationsgeräten von einem Erwachsenen begleitet werden. Diese Kontraindikationen bedeuten nicht, dass Sie kein Perkussions- oder Vibrationsgerät verwenden dürfen, wir raten Ihnen jedoch, vorher Ihren Arzt zu konsultieren.

Die Auswirkungen der Perkussionsmassage auf bestimmte medizinische Störungen werden derzeit erforscht, was zu einer Verkürzung der oben aufgeführten Liste von Kontraindikationen führen kann.

BITTE VOR DER VERWENDUNG LESEN

Die RYZR Progun ist ein hochmodernes tragbares Perkussionsmassagegerät, das Muskelkater und -steifheit lindert, das Aufwärmen und die Erholung vor und nach körperlicher Aktivität beschleunigt, die Beweglichkeit optimiert und die Durchblutung fördert.

AUFLADEN

Laden Sie Ihre RYZR Progun vor dem ersten Gebrauch sechs Stunden lang auf. Schließen Sie dazu das Ladegerät mit dem passenden Adapter an die Steckdose und anschließend an den Ladeanschluss an der Geräteunterseite an. Die Akkuanzeige blinkt, um den Ladevorgang anzuzeigen. Wenn alle vier Akkuanzeigen durchgehend leuchten, ist der Akku zu 85 % bis 100 % geladen. Alternativ können Sie das Ladegerät an die Dockingstation anschließen und die RYZR Progun darauf platzieren.

REINIGUNG UND LAGERUNG

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und das Ladegerät nicht angeschlossen ist. Wischen Sie Ihre RYZR Progun vorsichtig mit einem feuchten, sauberen Tuch ab. Lagern Sie sie bei Nichtgebrauch an einem sauberen, kühlen Ort.

PRODUKT

25 kg Stall Force

Hochdrucksensor

5 Intensitätsstufen
mit 1200 bis 3200 rpm

Speziell angepasste
Frequenzbereiche für
optimale Faszien
Behandlung



14 mm Amplitude/Tiefe

Designed für Langlebigkeit dank
einem Motorengehäuse und einer
Base komplett aus Aluminium

Akkulaufzeit: 9 h
(abhängig von der gewählten Stufe)

Ladestation

PRODUKTMERKMALE

Produktname	RYZR Progun (Massagepistole Pro)
Modell	A200217
Nennspannung	21.6 V
Frequenz / Intensitätsstufen	1. Stufe: 1400 rpm; 2. Stufe: 1800 rpm; 3. Stufe: 2300 rpm 4. Stufe: 2700 rpm; 5. Stufe: 3200 rpm
Stoßtiefe / Amplitude	14 mm
Lautstärke	max. 60 dB
Li-Ion-Akku	3350 mAh
AC-Ladegerät	110-240 V, 50/60 Hz-0,5 A-26VDC-1A
Arbeit in Wattstunden	72.36 Wh
Max. Ladezeit / Max. Nutzungsdauer	5 Stunden / 9 Stunden

LIEFERUMFANG



Teflon flat



Fork



Soft ball



Bullet






Thumb

- 1 Progun
- 5 Aufsätze (Teflon flat, fork, soft ball, bullet, thumb)
- 1 Ladestation
- 1 Ladekabel
- 1 Etui

- Beileger:
- 1 Schnellstartanleitung
- 1 Massageaufsätze
- 1 Kundenservice

SPEZIFIKATIONEN

1. Batteriestandsanzeige
2. Austauschbare Kopfbefestigungen (5)
3. Aluminiumschale
4. Griff mit präzisiertem Griff
5. Aufladestation
6. Geschwindigkeitsstufenanzeigen (5 LED-Leuchten)
7. Ein-/Ausschalter (R)
8. Intelligentes Drucksensorlicht
9. Vertikale Linie an Anbaugeräten und Gerät

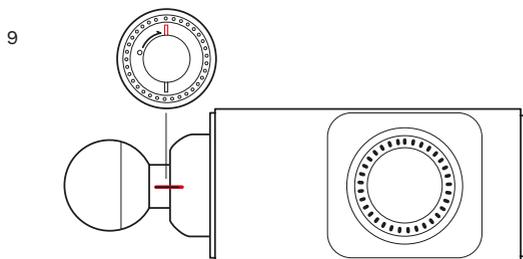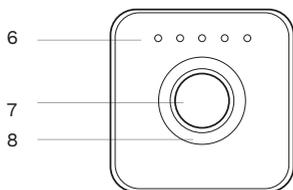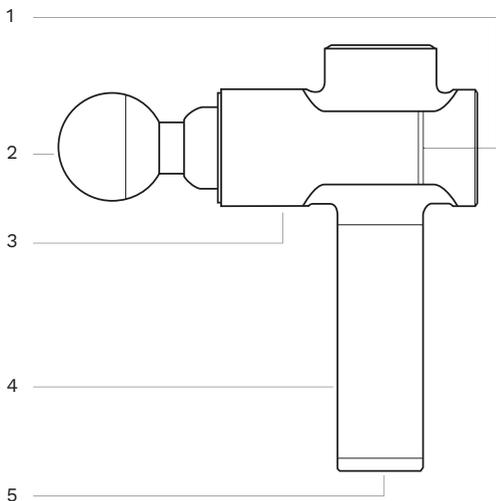


ANBRINGEN VON AUFSÄTZEN

Richten Sie den Aufsatz an der Spitze des Arms aus, und drücken Sie, um ihn anzubringen. Greifen Sie zum Entfernen den Aufsatz, indem Sie einen Finger auf jede Seite des Kunststoffverbinders legen. Ziehen Sie den Aufsatz ab.



Richten Sie beim Gabel-Aufsatz die Linie am Aufsatz nach oben aus und drücken Sie, um ihn anzubringen

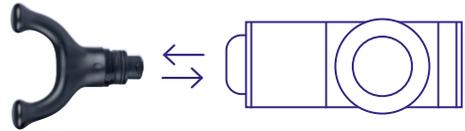

INBETRIEBNAHME

Halten Sie die Einschalttaste (R) 2 Sekunden lang gedrückt, um Ihre RYZR Progun einzuschalten. Sobald Ihr Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die erste Geschwindigkeitsstufe weiß auf. Zusätzlich zeigen bis zu vier blaue Leuchten an der Seite des Geräts den Akkustand an. Ihre RYZR Progun ist nun einsatzbereit.

Geschwindigkeiten (1–5) auswählen: Durch Drücken der Einschalttaste (R) wird die zweite Geschwindigkeitsstufe ausgewählt. Dies wird durch das zweite weiße Licht über der Einschalttaste (R) angezeigt. Mit jedem Drücken der R-Taste erhöht sich die Geschwindigkeit des Geräts. Dies wird durch das Licht über der R-Taste angezeigt.

Gerät ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste (R) 2 Sekunden lang bei einer beliebigen Geschwindigkeitsstufe gedrückt. Eine blaue LED leuchtet vollständig auf. Nach 5 Sekunden schaltet sich Ihr Gerät aus. Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Dauerbetrieb ab. Starten Sie es bei Bedarf neu.

Zum Wechseln der Aufsatzköpfe setzen Sie den gewünschten Aufsatz direkt in den Schaft/die Öffnung ein und drehen ihn im Uhrzeigersinn (ca. 230 cm), bis die vertikale Linie am Aufsatz mit der am Gerät übereinstimmt.

AUFSÄTZE

Einheitlich zur MiniGun: Das Aufsatz-Set der RYZR Progun umfasst fünf Kopfaufsätze, die für spezifische Behandlungen entwickelt wurden.



Teflon flat

Ideal für die Anwendung bei sehr dichten Muskelgruppen. Perfekt für intensives Training.



Fork

Abgerundete Enden zum Trainieren bestimmter Muskelgruppen.



Soft ball

Größere Oberfläche, beste Befestigung für den Anfang, um Schmerzpunkte einzugrenzen.



Bullet

Simulierte Klopfmassage, die eine Handklopfmassage mit gleichmäßiger Intensität simuliert, beispielsweise an Armen, Oberschenkeln und anderen gekrümmten Körperteilen.



Thumb

Gezielte, tiefe Schmerzlinderung bei schmerzhaften Knoten.

GARANTIE

1. Das Produkt von RYZR enthält eine kostenlosen Garantie von einem Jahr bei Vorlage des Kaufbelegs.
2. RYZR übernimmt keine kostenlosen Garantieleistungen für die folgenden vom Benutzer verursachten Störungen, wie z. B.:
 - a) Durch unbefugtes Zerlegen oder Verändern des Produkts verursachte Störungen.
 - b) Störungen oder Schäden, die durch versehentliches Fallenlassen während der Verwendung und Handhabung verursacht werden.
 - c) Störungen aufgrund unzureichender Instandhaltung.
 - d) Durch nicht ordnungsgemäße Befolgung der Anweisungen im Handbuch verursachte Störungen.
 - e) Durch unsachgemäße Reparatur durch nicht von RYZR autorisierte Einrichtungen verursachte Störungen.
3. Reparaturleistungen, die nicht unter die Garantie fallen, werden gemäß der entsprechenden Regelung berechnet.
4. Wenden Sie sich für Garantieforderungen umgehend per E-Mail an den Kundendienst.

KUNDENDIENST

Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen oder Anliegen haben. Unser Kundendienst-Team antwortet schnell und bietet Lösungen für alle möglicherweise auftretenden Probleme.

E-Mail: service@ryzr.de

Wenn das Produkt defekt ist oder eingeschickt werden muss, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb der angegebenen Garantiezeit mit Ihrer Bestellnummer. Entsorgen Sie keine Produktteile, die für die Inspektion oder Reparatur benötigt werden.