



# RYZRPODICURE

## Benutzerhandbuch

EN | **DE** | FR | ES | IT | PL



NOW YOU  
ARE A  
**RYZR**

## WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

### Fragen Sie vor der Anwendung Ihren Arzt, wenn Sie

- In ärztlicher Behandlung sind oder sich vor Kurzem einem chirurgischen Eingriff unterzogen haben;
- Bluthochdruck, eine Herzerkrankung, zerebrale Arteriosklerose oder zerebrale Thrombose haben;
- Hohes Fieber, einen bösartigen Tumor oder Osteoporose haben;
- Schwanger oder in der Menstruation sind;
- Einen Herzschrittmacher verwenden oder ein Medizinprodukt in den Fuß implantiert haben;
- Eine andere akute Krankheit haben.

### Betriebsumgebung

- Um Fehlfunktionen zu vermeiden und Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten, verwenden Sie das Produkt nicht in nassen Umgebungen, wie z. B. im Badezimmer, oder in der Nähe von Wasserquellen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Umgebungstemperaturen über 40 °C oder in lokal begrenzten Hochtemperaturumgebungen, z. B. in der Nähe einer Elektroheizung oder eines Herdes.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei Umgebungstemperaturen unter 5 °C, da die Verdickung des Schmieröls den Verschleiß von Getriebeteilen erhöhen und die Lebensdauer beeinträchtigen kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien und setzen Sie es nicht über längere Zeit der heißen Sonne aus, da dies die Lackschicht beschädigen kann.
- Wird das Produkt zur Verwendung von einem Aufbewahrungsort mit niedriger Temperatur in eine warme Umgebung verbracht, kann sich Wasserdampf in den Metallinnenteilen sammeln, was den normalen Betrieb des Produkts beeinträchtigen und sogar Schäden verursachen kann. Es wird empfohlen, das Produkt vor Beginn der Anwendung eine Stunde bei normaler Raumtemperatur liegenzulassen.

### **Warnung**

- Halten Sie das Produkt von scharfkantigen Gegenständen fern und brechen Sie die Anwendung ab, wenn der Fußtuchbezug beschädigt ist; Zehen können vom Gerät angesaugt werden, was zu Verletzungen führen kann.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Beaufsichtigen Sie Kinder und lassen Sie sie nicht damit

spielen!

- Falls das Produkt versehentlich ins Wasser fällt, geben Sie es zur Reparatur zurück; andernfalls darf es nicht verwendet werden!
- Das Produkt steht unter Hochdruck. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren. Es besteht Verletzungsgefahr!

### Hinweis

- Machen Sie sich mit dem gesamten Inhalt dieses Handbuchs im Detail vertraut, um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Anwendung des Produkts zu gewährleisten.
- Beaufsichtigen Sie Kinder und lassen Sie sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung durch Personen bestimmt, die nicht körperlich gesund sind, sensorische oder geistige Behinderungen aufweisen oder denen es an relevanter Erfahrung und Wissen fehlt (einschließlich Kinder), sofern keine Person anwesend ist, die für ihre Sicherheit sorgt und die Anwendung dieses Produkts überwacht und anleitet.
- Das Produkt umfasst Heizvorrichtungen und die Oberfläche des Geräts wird sehr heiß. Hitzeempfindliche Personen müssen bei der Anwendung mit Vorsicht vorgehen.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel und hängen Sie das Produkt am Netzkabel auf, um einen Kabelbruch oder schlechten Kontakt zu vermeiden. Halten Sie den Stecker fest, wenn Sie das Netzkabel ausstecken.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss das Produkt vom Hersteller, einer geeigneten Instandhaltungseinrichtung oder professionellem Instandhaltungspersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Decken Sie das Produkt während der Anwendung nicht mit einer Decke ab und achten Sie darauf, dass die Wärmeableitungsöffnung unter dem Gerät nicht blockiert wird; andernfalls kann es zu Fehlfunktionen oder Beschädigung durch Überhitzung der Innenteile führen.
- Drücken Sie nicht zu kräftig oder mit dem Fingernagel auf das Bedienfeld. Der Schalter sollte nur leicht gedrückt werden.
- Das Bedienfeld darf nicht mit Flüssigkeiten wie Wasser in Berührung kommen und die Bedienschalter dürfen nicht mit nassen Händen betätigt werden.
- Führen Sie keine Gegenstände in eine Öffnung des Produkts ein.
- Sie dürfen während der Anwendung des Produkts nicht einschlafen.

- Wenden Sie das Produkt nicht innerhalb einer Stunde vor und nach einer Mahlzeit an, um Nebenwirkungen zu vermeiden.
- Die Massagezeit bei kontinuierlicher Anwendung dieses Produkts darf 30 Minuten nicht überschreiten. Die Zeit für das Aufwärmen der Füße darf zwei Stunden nicht überschreiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie betrunken sind oder Beschwerden haben.
- Brechen Sie die Anwendung ab, wenn Sie während der Anwendung Beschwerden verspüren.
- Wenn Sie die Stromversorgung unterbrechen möchten, schalten Sie alle Bedienelemente aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker nach der Anwendung und vor der Reinigung aus der Steckdose.
- Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn das Gerät ausfällt, und senden Sie das Gerät vor der weiteren Anwendung zur Reparatur an den Hersteller oder eine geeignete Instandhaltungseinrichtung.
- Dieses Produkt darf nicht zur Selbstdiagnose oder Behandlung verwendet werden. Jede erforderliche Diagnose oder Behandlung muss durch medizinisches Personal erfolgen.

## PRODUKT

3 Intensitätsstufen  
der Massage

Zuschaltbare Wärme-  
und Ionentherapie-  
funktion

Steuerung einfach  
per Touch mit  
Händen und Füßen  
möglich




3 Stufen des  
Luftdrucks / der  
Kompression

Abnehmbarer,  
waschbarer  
Bezug

## PRODUKTMERKMALE

Produktname	RYZR Podicure (Fußmassagegerät)
Modell	A200206
Nennleistung	40 W
Nennspannung	110 V
Netzspannung	Eingang AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
Frequenz	60 Hz
Lautstärke	max. 55 dB
Massagestufen	3 Massage-Intensitäten
Kompressionsstufen	3 Kompressions-Intensitäten
Infrarot-Wärme-Stufen	3 Stufen bis 50°C
Nennbetriebszeit	15 min. bis zur autom. Abschaltung
Netzstecker	Eurostecker
Art der Stromversorgung	Netzbetrieben

## AUFBAU DES PRODUKTS

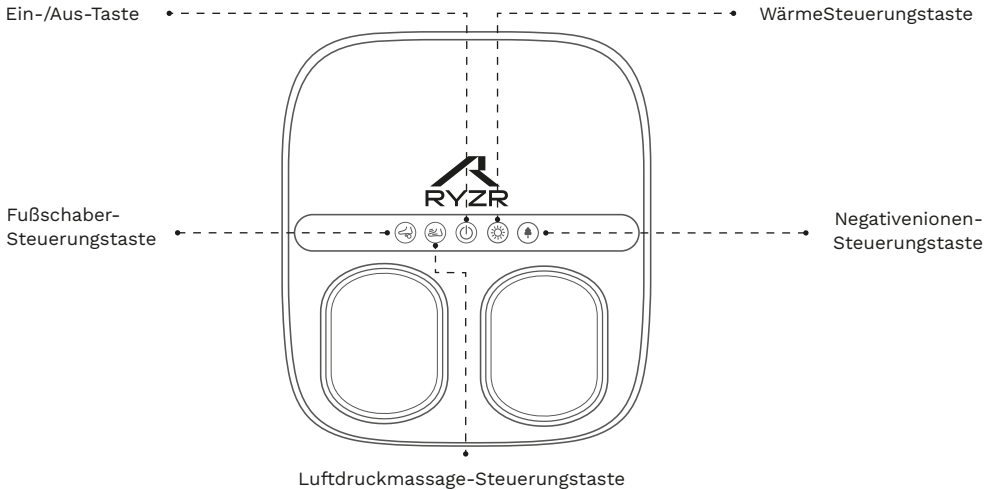

- Mittleres Feld: Vier voneinander unabhängige Steuerungstasten – zur Steuerung der Massagefunktion des Produkts
- Mitte Vorderseite unten: Schabender Massagekopf – führt Akupunkturpunktmassage im Bereich des Fußgewölbes durch und ist beheizbar
- Vorderes Ende Vorderseite unten: Rollender Massagekopf – führt Akupunkturpunktmassage im Sohlenbereich durch
- Hinteres Ende Vorderseite unten: Oberer Massagekopf – führt Akupunkturpunktmassage im Fersenbereich durch
- Oberflächenfutter: Luftsack – Verschließen am Spann für pneumatische Massage auf beiden Seiten der Ferse zur Durchführung einer Luftdruckmassage
- Oberfläche Vorderseite unten: Waschbarer Tuchbezug – einfach zu reinigen
- Unterseite: Vorrichtung zur Aufbewahrung des Netzkabels
- Fußabdeckung für Luftdruckfunktion
- Wärme- und Heißkompressionsfunktion
- Germanit zur Akupunkturpunktstimulation der Fußsohle

## FUNKTIONSBESCHREIBUNG

- Die Ein-/Aus-Leuchte blinkt, wenn sich das Massagegerät im Standby-Modus befindet.
- Ein/Aus-Schalter: Wenn Sie den Ein-/Aus-Schalter drücken, wird das Gerät eingeschaltet.
- Fußsohlenschaber: Drei Fußsohlenschaber-Modi sowie Ausschalten der Fußsohlenschaber-Funktion mit dieser Taste.
- Luftdruck: Drei Luftdruck-Intensitätsmodi sowie Ausschalten der Luftdruckmassage-Funktion mit dieser Taste
- Wärme: Betätigen Sie die Wärmetaste, um die Wärmefunktion einzuschalten und betätigen Sie die Taste erneut, um die Wärmefunktion auszuschalten
- Negativionen: Betätigen Sie die Negativionen-Funktionstaste, um die Negativionen-Funktion einzuschalten, und betätigen Sie die Taste erneut, um die Negativionen-Funktion auszuschalten

## EIGENSCHAFTEN DES PRODUKTS

- Optimiertes Design, stilvoll und ansprechend, leicht und tragbar.
- Integration mehrerer Gesundheitsmassagefunktionen wie Fußsohlen-Rollen, Schaber, Fersenmassage, Luftdruck und Wärme.
- Sohlenvollmassage und Tiefenmassage jedes Akupunkturpunkts, um alle Meridiane und Fußreflexzonen des gesamten Körpers zu erreichen.
- Der Tuchbezug ist abnehmbar und waschbar, damit er stets sauber bleibt.
- Praktische Vorrichtung zur Aufbewahrung des Netzkabels.

## INSTANDHALTUNG DES PRODUKTS

### Aufbewahrung

- Legen Sie das Produkt in die Verpackung, wenn es nicht verwendet wird, und bewahren Sie es an einem sicheren, trockenen, gut belüfteten und kühlen Ort auf.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht verdreht wird.
- Hängen Sie das Produkt nicht am Netzkabel auf.
- Schützen Sie die Produktoberfläche vor Kratzern durch scharfkantige Gegenstände.
- Setzen Sie das Produkt keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen aus.

### Reinigung

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass der Hauptnetzschalter in der Aus-Position steht, und stecken Sie den Netzstecker aus.
- Reinigen Sie die Produktoberfläche mit einem trockenen Tuch.
- Hängen Sie das Produkt nicht am Netzkabel auf.
- Reinigen Sie das Produkt nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln wie Benzol oder Verdüner.

### Instandhaltung

- Halten Sie das Produkt sauber und setzen Sie es keinen hohen Temperaturen aus.
- Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, schützen Sie es mit einer Staubschutzabdeckung (nicht im Lieferumfang enthalten) vor Staub.

## FEHLERBEHEBUNG

Bei Problemen, die bei der Anwendung dieses Produkts auftreten, können die folgenden Tipps und möglichen Lösungen helfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, senden Sie das Produkt zur Überprüfung und Reparatur an den Kundendienst oder einen autorisierten Techniker.

Fehlfunktion	Mögliche Ursachen	Behebung
Keine Funktion	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keine Stromversorgung</li> <li>2. Funktionstaste nicht eingeschaltet</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Netzanschluss herstellen oder Netzanschluss prüfen</li> <li>2. EIN/AUS-Taste betätigen</li> </ol>
Gerät stoppt plötzlich	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stromausfall</li> <li>2. Massage dauert mehr als 15 Minuten</li> <li>3. Zu lange ununterbrochene Anwendung, Überhitzungsschutz</li> <li>4. Rotation des Massageballs durch übermäßige Kraft blockiert.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anschluss der Stromversorgungsschnittstelle überprüfen</li> <li>2. EIN/AUS-Taste erneut betätigen</li> <li>3. EIN/AUS-Taste erneut betätigen, nachdem sich das Produkt abgekühlt hat</li> <li>4. EIN/AUS-Taste erneut betätigen</li> </ol>

## **GARANTIE**

1. Das Produkt von RYZR enthält eine kostenlosen Garantie von einem Jahr bei Vorlage des Kaufbelegs.
2. RYZR übernimmt keine kostenlosen Garantieleistungen für die folgenden vom Benutzer verursachten Störungen, wie z. B.:
  - a) Durch unbefugtes Zerlegen oder Verändern des Produkts verursachte Störungen.
  - b) Störungen oder Schäden, die durch versehentliches Fallenlassen während der Verwendung und Handhabung verursacht werden.
  - c) Störungen aufgrund unzureichender Instandhaltung.
  - d) Durch nicht ordnungsgemäße Befolgung der Anweisungen im Handbuch verursachte Störungen.
  - e) Durch unsachgemäße Reparatur durch nicht von RYZR autorisierte Einrichtungen verursachte Störungen.
3. Reparaturleistungen, die nicht unter die Garantie fallen, werden gemäß der entsprechenden Regelung berechnet.
4. Wenden Sie sich für Garantieforderungen umgehend per E-Mail an den Kundendienst.

## **KUNDENDIENST**

Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen oder Anliegen haben. Unser Kundendienst-Team antwortet schnell und bietet Lösungen für alle möglicherweise auftretenden Probleme.

E-Mail: [service@ryzr.de](mailto:service@ryzr.de)

Wenn das Produkt defekt ist oder eingeschickt werden muss, kontaktieren Sie uns bitte innerhalb der angegebenen Garantiezeit mit Ihrer Bestellnummer. Entsorgen Sie keine Produktteile, die für die Inspektion oder Reparatur benötigt werden.